

Ear Cleaner With Camera

User Manual
EN

Precautions

- Do not use this tool if you have an active ear infection, ruptured eardrum or redness. Discontinue use immediately and seek medical care whenever you feel pain or discomfort during use.
- Please read the instruction carefully. We do not assume responsibility for any injuries that might be caused by our products. If you have ear drainage, discharge, ear pain, ear perforation or injury, please consult with doctors before using.
- The downloaded app helps you visualize and remove ear wax from ear canal. Please keep the ear spoon at a safe distance from the eardrum.
- Please be careful when using it to avoid getting too deep into the ear canal and causing injury to ear canal.
- If the ear wax is hard and stubborn to remove, please use ear drops for a few days to soften it before removing. Do not press too hard on your ear canal when removing the wax to avoid any scraping.
- If there is a significant buildup of earwax when first using the device, it's best to remove the wax in stages to avoid irritation.
- After the initial wax cleaning, use the device as required to avoid any further build-up of wax.


EN-2

- Always disinfect the accessories and device with alcohol after use. When cleaning the lens, please wipe carefully with professional alcohol wipe cotton swab. It is forbidden to soak in water or wash the whole body.
- It is forbidden to use this device while charging.
- It is prohibited for children to use this product alone to avoid careless harm.

Steps to use on the phone

Step 1

Download "Soulear" App
For IOS:
Download and install the App "Soulear" from App Store.
For Android:
Download and install the App "Soulear" from Google Play Store.
Optional:
Scan the QR Code below to download the App.

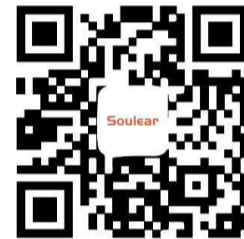

EN-3

Compatible Device:
Android 4.4, iOS 9.0 and higher version.
Android system phone like Samsung S7, Galaxy S6 edge, Note 8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel, XL, Pixel 3, Nexus 6p, Huawei Mate9, Mate 10, Mate 20 Pro, OnePlus etc.
IOS system phone like iPhone 6, 6s, 7, 7+, 8, 8+, X, XR, etc.

Notice:
This model can't work for computer systems!

Step 2


Long press the switch key to open the device, after 5 seconds, then step into the next operation.



Step 3

Open the "Soulear" App, click the "Connect Device", follow the pop-up prompt and click to connect now to jump to the mobile WIFI setting interface.

EN-4

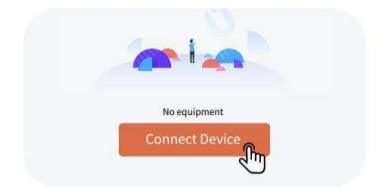


Step 4

Find "Soulear-xxxx" on the WIFI setting interface and click to connect.



Step 5


After the mobile phone displays "Soulear-xxxx" WIFI is connected, return to the App again and click the "Connected equipment" to enter the device.

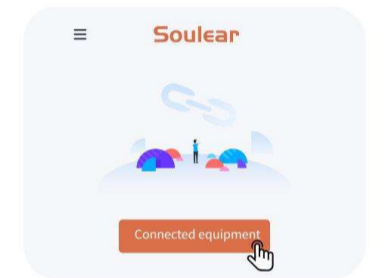

EN-5

After connecting to the product WIFI connection, you will be asked some questions:

IOS:
"Soulear" would like to find and connect to devices on your local network.
Suggestion: Click "OK"


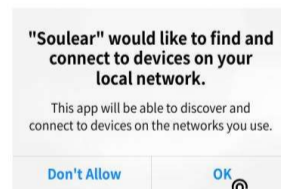


Allow "Soulear" to use wireless data?
Suggestion:
Click "WLAN&Cellular/WLAN Only"



EN-6

Android:
If your mobile phone displays the following prompts, WiFi has no data connection, whether to continue trying to use the WiFi? Whether to keep the connection? Whether to switch WiFi?
Suggestion:
Click "Keep" / "CONNECT" / "Decline" option

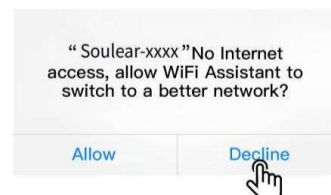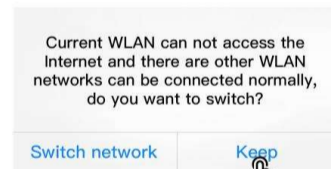

EN-7

Troubleshooting

Problems	Suggestions
Cannot store photos or videos to your phone	Let Soulear permit the authority of photos, media and files in your device
Camera is no response, camera doesn't light up	Please charge the device
App crashed	Please uninstall App and scan the QR code to install
Live image does not show after launching the app	1. Make sure you connect the correct WIFI ID "Soulear-xxxx". 2. The question: This WLAN network has no Internet access. Connect anyway? Please be sure to choose the "Connect". If you choose "CANCEL" at the first time, you need to forget network of the "Soulear-xxxx" WIFI on your phone, then connect with this WIFI again. Continue to open the app and choose "CONNECT" of this question, so that it can work properly. 3. Enter your mobile device setting and allow the "Soulear" App to access "WLAN" or "WLAN & Cellular Data". 4. Close the App and open it again. 5. Turn the mobile phone data on, then off again.

EN-8

Ear endoscope's red light on	Please charge the product
WIFI connection break	Please restart ear endoscope, open the App, connect to WIFI
When iPhone prompts "cannot join this WIFI, the network is temporarily unavailable, please try again later"	When the above situation occurs, please try to turn off the product, turn it on again after 30s, and reconnect to WIFI to connect and use.
When Android phone connects to WIFI, it prompts "Network access is full"	When the above situation occurs, please try to turn off the product, turn it on again after 30s, and reconnect to WIFI to connect and use.
The power indicator of the ear pick shows red	Please use the matching charging cable to charge

If the above operating instructions fails to solve the problems, please contact the seller's customer service by email, and we will provide you with further solutions

EN-9

Product Parameter

Product Name Ear Cleaner with Camera	Working Frequency 2.4Ghz
Network Standard IEEE 802.11b/g/n	Image Sensor CMOS
Image Transmission Rate 30fps	Gravity Sensor 6 Axis
Environment Temperature 10-50 °C	Charging Time 1.5h
Battery Life About 70minutes	Working Voltage 3.7V-4.2V
Input Parameter 5V=0.4A	Lens Diameter 3.5mm
Rate Power 0.75W	Resolution 1080P
Best Focal Length 1.5-2cm	Charging port USB2.0

EN-10

Limpiador de oídos Con cámara

Manual de usuario
ES

Precauciones

- No utilice esta herramienta si tiene una infección de oído activa, tímpano roto o enrojecimiento. Suspender su uso inmediatamente y busque atención médica siempre que sienta dolor o malestar durante el uso.
- Lea atentamente las instrucciones. No asumimos responsabilidad por las lesiones que puedan causar nuestros productos. Si tiene drenaje en el oído, secreción, dolor de oído, perforación del oído o lesiones, consulte con los médicos antes de usarlo.
- La aplicación descargada te ayuda a visualizar y eliminar el cerumen del canal auditivo. Mantenga la cuchara a una distancia segura del tímpano.
- Tenga cuidado al usarlo para evitar penetrar demasiado en el canal auditivo y causar lesiones en el canal auditivo.
- Si el cerumen es duro y difícil de eliminar, utilice gotas para los oídos durante unos días para suavizarlo antes de retirarlo. No presione demasiado el canal auditivo al retirar la cera para evitar raspaduras.
- Si hay una acumulación significativa de cerumen al usar el dispositivo por primera vez, es mejor eliminar el cerumen por etapas para evitar la irritación.
- Después de la limpieza inicial con cera, utilice el dispositivo según sea necesario para evitar una mayor acumulación de cera.

ES-2

- Desinfecte siempre los accesorios y el dispositivo con alcohol después de su uso. Cuando al limpiar la lente, límpiela cuidadosamente con un hisopo de algodón profesional con alcohol. Está prohibido sumergirlo en agua o lavar todo el cuerpo.
- Está prohibido utilizar este dispositivo mientras se carga.
- Está prohibido que los niños utilicen este producto solos para evitar daños por descuido.

Pasos para usar en el teléfono

Paso 1

Descargar la aplicación "Soulear"
Para IOS:
Descargue e instale la aplicación "Soulear" desde App Store.
Para Android:
Descargue e instale la aplicación "Soulear" desde Google Play
Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación. Store. Opcional:



ES-3

Dispositivo compatible:
Android 4.4, iOS 9.0 y versiones superiores.
Teléfono con sistema Android como Samsung S7, Galaxy S6 borde, Nota 8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel, XL, Pixel 3, Nexus 6p, Huawei Mate9, Mate 10, Mate 20 Pro, OnePlus, etc.

Teléfono con sistema IOS como iPhone 6, 6s, 7, 7+, 8, 8+, X, XR, etc.

Aviso:
¡Este modelo no puede funcionar para sistemas informáticos!

Paso 2

Mantenga presionada la tecla del interruptor para abrir el dispositivo, después de 5 segundos, luego pase a la siguiente operación.



Paso 3

Abra la aplicación "Soulear", haga clic en "Conectar dispositivo" sigue la ventana emergente mensaje y haga clic para conectarse ahora para saltar a la interfaz de configuración de WIFI móvil.

ES-4




Etapa 4

Busque "Soulear-xxxx" en la interfaz de configuración de WIFI y haga clic para conectarse.



Paso 5


Después de que el teléfono móvil muestre "Soulear-xxxx" WIFI está conectado, regrese a la aplicación nuevamente y haga clic en "Equipo conectado" para ingresar al dispositivo.

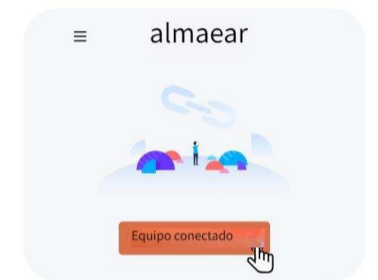


ES-5

Después de conectarse a la conexión WIFI del producto, se le harán algunas preguntas:

IOS:
"Soulear" le gustaría encontrar y conectarse a dispositivos en su red local.
Sugerencia: haga clic en "Aceptar"

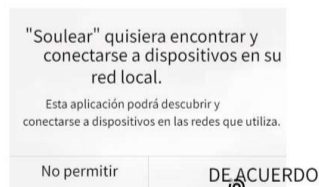




¿Permitir que "Soulear" utilice datos inalámbricos?
Sugerencia:
Haga clic en "WLAN y celular/solo WLAN"

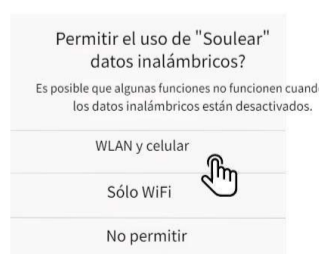

ES-6

Androide:
Si su teléfono móvil muestra el siguientes indicaciones, WiFi no tiene datos conexión, si continuar intentando usar el WiFi? Si mantener el conexión? ¿Si cambiar WiFi?

Sugerencia:
Haga clic en la opción "Mantener"/"CONECTAR"/"Rechazar"

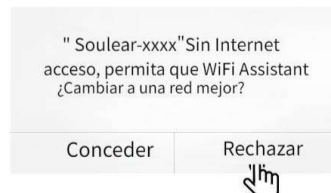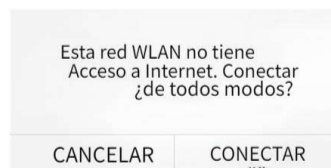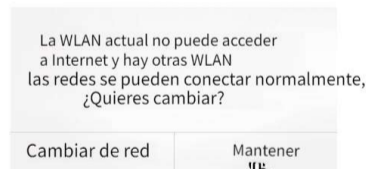

ES-7

Solución de problemas

Problemas	Sugerencias
No se pueden almacenar fotos o videos a tu teléfono	Dejemos que Soulear permita el autoridad de fotos, medios y archivos en su dispositivo
La cámara no responde, la cámara no se enciende	Por favor cargue el dispositivo
La aplicación falló	Desinstale la aplicación y escanee el código QR para instalarla
La imagen en vivo no mostrar después del lanzamiento la aplicación	1. Asegúrese de conectar el ID WIFI correcto "Soulear-xxxx". 2. La pregunta: esta WLAN La red no tiene acceso a Internet. ¿Conectarse de todos modos? Asegúrese de elegir "Conectar". Si elige "CANCELAR" en la primera tiempo, debe olvidarse de la red WIFI "Soulear-xxxx" en su teléfono, luego conéctese con Este WIFI de nuevo. Continúe abriendo la aplicación y elija "CONECTAR" de esta pregunta, para que funcione correctamente. 3. Ingresa tu dispositivo móvil configuración y permita que la aplicación "Soulear" acceda a "WLAN" o "WLAN y datos móviles". 4. Cierra la aplicación y ábrela nuevamente. 5. Encienda los datos del teléfono móvil y luego apáguelos nuevamente.

ES-8

El endoscopio de oído es rojo, luces encendidas	Por favor cargue el producto
Interrupción de la conexión WIFI	Reinicie el endoscopio del oído, abra la aplicación, conéctate a WIFI
Quando el iPhone te lo pide "No puedo conectarme a este WIFI, la red no está disponible temporalmente, inténtalo de nuevo más tarde."	Quando la situación anterior ocurre, intente apagar el producto, enciéndalo nuevamente después de 30 segundos y vuelva a conectarse a WIFI para conectarlo y usarlo.
Quando el teléfono Android se conecta a WIFI, indica "Red el acceso es completo"	Quando la situación anterior ocurre, intente apagar el producto, enciéndalo nuevamente después de 30 segundos y vuelva a conectarse a WIFI para conectarlo y usarlo.
El indicador de potencia de la púa de oreja se muestra roja	Por favor use la combinación cable de carga para cargar

Si las instrucciones de funcionamiento anteriores no resuelven el problema problemas, por favor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del vendedor mediante correo electrónico y le proporcionaremos más soluciones

ES-9

Parámetro del producto

nombre del producto Limpiador de oídos con cámara	Frecuencia de trabajo 2,4 GHz
Estándar de red IEEE802.11b/g/n	Sensor de imagen CMOS
Velocidad de transmisión de 30fps	sensor de gravedad 6 ejes
Temperatura ambiental 10-50°C	Tiempo de carga 1,5h
Duración de la batería Aproximadamente 70 minutos	Tensión de trabajo 3,7 V-4,2 V
Parámetro de entrada 5V=0.4A	Diámetro de la lente 3.5mm
Tasa de potencia 0,75W	Resolución 1080P
Mejor distancia focal 1.5-2cm	Puerto de carga USB2.0

ES-10

Ohrenreiniger Mit Kamera

Benutzerhandbuch
DE

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, wenn Sie an einer aktiven Ohrenentzündung, einem Trommelfellriss usw. leiden
- Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Wir übernehmen keine Verantwortung für Verletzungen, die durch unsere Produkte verursacht werden könnten. Wenn bei Ihnen Ohrenentzündung vorliegt, Ausfluss, Ohrenscherzen, Ohrperforation oder Bei Verletzungen konsultieren Sie bitte vor der Anwendung einen Arzt.
- Die heruntergeladene App hilft Ihnen, Ohrschmalz sichtbar zu machen und aus dem Gehörgang zu entfernen. Bitte halten Sie den Ohröffel in sicherem Abstand zum Trommelfell.
- Bitte seien Sie bei der Verwendung vorsichtig, um zu vermeiden, dass es zu tief in den Gehörgang eindringt und den Gehörgang verletzt.
- Wenn das Ohrschmalz hart und hartnäckig zu entfernen ist, verwenden Sie bitte einige Zeit lang Ohrentropfen, um es weich zu machen, bevor Sie es entfernen. Drücken Sie beim Entfernen des Ohrschmalzes nicht zu stark auf Ihren Gehörgang, um Kratzer zu vermeiden.
- Wenn sich bei der ersten Verwendung des Geräts eine erhebliche Ansammlung von Ohrschmalz gebildet hat, ist es am besten, das Ohrschmalz schrittweise zu entfernen, um Reizungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nach der ersten Wachsreinigung nach Bedarf, um weitere Wachsansammlungen zu vermeiden.

DE-2

- Desinfizieren Sie Zubehör und Gerät nach Gebrauch immer mit Alkohol. Wann
Um die Linse zu reinigen, wischen Sie sie bitte vorsichtig mit einem professionellen, alkoholgetränkten Wattestäbchen ab. Es ist verboten, in Wasser einzuweichen oder den ganzen Körper zu waschen.
- Es ist verboten, dieses Gerät während des Ladevorgangs zu verwenden.
- Es ist Kindern verboten, dieses Produkt alleine zu verwenden, um unvorsichtige Schäden zu vermeiden.

Schritte zur Verwendung am Telefon

Schritt 1

Laden Sie die „Soulear“-App herunter
Für IOS:
Laden Sie die App „Soulear“ aus dem App Store herunter und installieren Sie sie.
Für Android:
Laden Sie die App „Soulear“ aus dem Google Play Store herunter und Scannen Sie den QR-Code unten, um die App herunterzuladen. installieren Sie sie. Optional:



DE-3

Kompatibles Gerät:
Android 4.4, IOS 9.0 und höhere Version.
Android-Systemtelefon wie Samsung S7, Galaxy S6 Edge, Note 8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel, XL, Pixel 3, Nexus 6p, Huawei Mate9, Mate 10, Mate 20 Pro, OnePlus usw.

IOS-Systemtelefone wie iPhone 6, 6s, 7, 7+, 8, 8+, X, XR usw.

Notiz:
Dieses Modell kann nicht für Computersysteme verwendet werden!

Schritt 2

Drücken Sie lange die Umschalttaste, um das zu öffnen
Schalten Sie das Gerät nach 5 Sekunden aus und fahren Sie dann mit dem nächsten Vorgang fort.



Schritt 3

Öffnen Sie die „Soulear“-App, klicken Sie auf „Gerät verbinden“ folgen Sie dem Popup Eingabeaufforderung und klicken Sie auf „Jetzt verbinden“, um zur mobilen WLAN-Einstellungsschnittstelle zu springen.

DE-4



Schritt 4

Suchen Sie „Soulear-xxxx“ auf der WIFI-Einstellungsfläche und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.



Schritt 5

Nachdem auf dem Mobiltelefon „Soulear-xxxx“ angezeigt wird. WLAN ist verbunden, kehren Sie erneut zur App zurück und klicken Sie auf „Verbundene Geräte“, um das Gerät aufzurufen.



DE-5

Nachdem Sie die WLAN-Verbindung des Produkts hergestellt haben, werden Ihnen einige Fragen gestellt:

IOS:
„Soulear“ möchte Geräte in Ihrem lokalen Netzwerk finden und eine Verbindung zu ihnen herstellen. Vorschlag: Klicken Sie auf „OK“



„Soulear“ erlauben, drahtlose Daten zu nutzen?
Anregung:
Klicken Sie auf „WLAN&Mobilfunk/Nur WLAN“



EN-6

Android:
Wenn Ihr Mobiltelefon das anzeigt
Nach den Eingabeaufforderungen verfügt das WLAN über keine Daten Verbindung, ob weiterhin versucht werden soll, das WLAN zu nutzen? Ob die Verbindung beibehalten werden soll

Verbindung? Ob WLAN wechseln?
Anregung:
Klicken Sie auf die Option „Behalten“/„VERBINDEN“/„Ablehnen“

Aktuelles WLAN kann nicht auf das Internet zugreifen und es gibt andere WLANs Netzwerke können normal verbunden werden, willst du wechseln?



Dieses WLAN-Netzwerk hat keine Internet Zugang. Verbinden Trotzdem?



„Soulear-xxxx“ Kein Internet Zugriff, erlauben Sie WiFi Assistent Auf ein besseres Netzwerk umsteigen?



EN-7

Fehlerbehebung

Probleme	Vorschläge
Fotos können nicht gespeichert werden oder Videos auf Ihr Telefon	Lassen Sie Soulear das zulassen Autorität von Fotos, Medien und Dateien auf Ihrem Gerät
Kamera reagiert nicht, Kamera leuchtet nicht	Bitte laden Sie das Gerät auf
App ist abgestürzt	Bitte deinstallieren Sie die App und scannen Sie den QR-Code zur Installation
Live-Bild nicht nach dem Start anzeigen die App	1. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige WLAN-ID „Soulear-xxxx“ anschließen. 2. Die Frage: Dieses WLAN Das Netzwerk hat keinen Internetzugang. Trotzdem verbinden? Bitte achten Sie darauf, „Verbinden“ auszuwählen. Wenn Sie zunächst „ABBRECHEN“ wählen Zeit müssen Sie das WLAN-Netzwerk „Soulear-xxxx“ vergessen Ihr Telefon und stellen Sie dann eine Verbindung her dieses WIFI wieder. Öffnen Sie die App weiter und wählen Sie bei dieser Frage „VERBINDEN“, damit sie ordnungsgemäß funktioniert. 3. Geben Sie Ihr Mobilgerät ein Einstellung und erlauben Sie der „Soulear“-App den Zugriff auf „WLAN“ oder „WLAN & Mobilfunkdaten“. 4. Schließen Sie die App und öffnen Sie sie erneut. 5. Schalten Sie die Mobilfunkdaten ein und wieder aus.

EN-8

Das Ohr-Endoskop ist rot Licht an	Bitte laden Sie das Produkt auf
Unterbrechung der WLAN-Verbindung	Bitte starten Sie das Ohrendoskop neu. Öffnen Sie die App und stellen Sie eine Verbindung zum WLAN her
Wenn das iPhone dazu auffordert sich mit diesem WLAN zu verbinden, das Netzwerk ist vorübergehend nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.	Wenn die obige Situation Wenn ein Problem auftritt, versuchen Sie bitte, das Produkt auszuschalten, schalten Sie es nach 30 Sekunden wieder ein und verbinden Sie es erneut mit dem WLAN, um es zu verbinden und zu verwenden.
Beim Android-Handy verbindet sich mit WIFI, es fordert „Netzwerk“ auf Der Zugriff ist voll.	Wenn die obige Situation Wenn ein Problem auftritt, versuchen Sie bitte, das Produkt auszuschalten, schalten Sie es nach 30 Sekunden wieder ein und verbinden Sie es erneut mit dem WLAN, um es zu verbinden und zu verwenden.
Die Leistungsanzeige von Der Ohrstöpsel ist rot	Bitte verwenden Sie das passende Ladekabel zum Aufladen
Wenn die obige Bedienungsanleitung das Problem nicht löst Bei Problemen wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Kundendienst des Verkäufers E-Mail, und wir werden Ihnen weitere Lösungen anbieten	

EN-9

Produktparameter

Produktname Ohrenreiniger mit Kamera	Arbeitsfrequenz 2,4 GHz
Netzwerkstandard IEEE 802.11b/g/n	Bildsensor CMOS
Bildübertragungsrate 30fps	Schwerkraft-Sensor 6 Achsen
Umgebungstemperatur 10-50 °C	Ladezeit 1,5h
Batterielebensdauer Etwa 70 Minuten	Betriebsspannung 3,7V-4,2V
Eingabeparameter 5V=0,4A	Linsendurchmesser 3.5mm
Bewerten Sie die Leistung 0,75 W	Auflösung 1080P
Beste Brennweite 1.5-2cm	Aufladestation USB2.0

DE-10

Nettoyant pour les oreilles Avec un appareil photo

Manuel de l'Utilisateur
FR

Précautions

- N'utilisez pas cet outil si vous avez une otite active, une rupture du tympan ou rougeur. Cesser immédiatement l'utilisation et consultez un médecin chaque fois que vous ressentez une douleur ou un inconfort pendant l'utilisation.
- Veillez lire attentivement les instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les blessures qui pourraient être causées par nos produits. Si vous avez un drainage des oreilles, écoulement, douleur à l'oreille, perforation de l'oreille ou blessure, veuillez consulter des médecins avant de l'utiliser.
- L'application téléchargée vous aide à visualiser et à éliminer le cérumen du conduit auditif. Veuillez garder la cuillère auriculaire à une distance sûre du tympan.
- Soyez prudent lorsque vous l'utilisez pour éviter de pénétrer trop profondément dans le conduit auditif et de causer des blessures au conduit auditif.
- Si le cérumen est dur et difficile à enlever, veuillez utiliser des gouttes auriculaires pendant quelques jours pour le ramollir avant de le retirer. N'appuyez pas trop fort sur votre conduit auditif lors du retrait du cérumen pour éviter tout grattage.
- S'il y a une accumulation importante de cérumen lors de la première utilisation de l'appareil, il est préférable de retirer le cérumen par étapes pour éviter les irritations.
- Après le nettoyage initial de la cire, utilisez l'appareil selon les besoins pour éviter toute accumulation supplémentaire de cire.

FR-2

- Désinfectez toujours les accessoires et l'appareil avec de l'alcool après utilisation. Quand Pour nettoyer l'objectif, veuillez l'essuyer soigneusement avec un coton-tige professionnel imbibé d'alcool. Il est interdit de tremper dans l'eau ou de laver tout le corps.
- Il est interdit d'utiliser cet appareil pendant le chargement.
- Il est interdit aux enfants d'utiliser ce produit seuls pour éviter tout dommage imprudent.

Étapes à utiliser sur le téléphone

Étape 1

Téléchargez l'application « Soulear »
Pour IOS :
Téléchargez et installez l'application « Soulear » depuis l'App Store.
Pour Android:
Téléchargez et installez l'application « Soulear » depuis Google Play Store. Facultatif:
Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.



FR-3


Appareil compatible :
Android 4.4, iOS 9.0 et versions supérieures.
Téléphone système Android comme Samsung S7, Galaxy Bord S6, Note 8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel, XL, Pixel 3, Nexus 6p, Huawei Mate9, Mate 10, Mate 20 Pro, OnePlus etc.

Téléphone système IOS comme iPhone 6, 6s, 7, 7+, 8, 8+, X, XR, etc.

Avis:
Ce modèle ne peut pas fonctionner pour les systèmes informatiques !

Étape 2


Appuyez longuement sur la touche interrupteur pour ouvrir le appareil, après 5 secondes, puis passez à l'opération suivante.

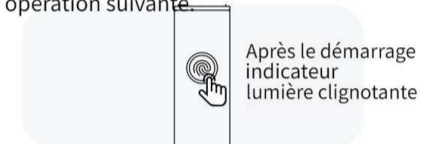

Étape 3

Ouvrez l'application "Soulear", cliquez sur le "Connecter l'appareil" suivez la fenêtre contextuelle invitez et cliquez pour vous connecter maintenant pour accéder à l'interface de configuration WIFI mobile.

FR-4

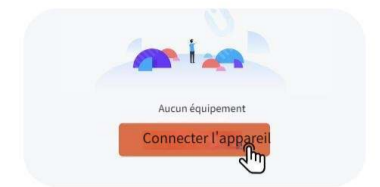

Étape 4

Recherchez « Soulear-xxxx » sur l'interface de configuration WIFI et cliquez pour vous connecter.



Étape 5

Une fois que le téléphone mobile affiche « Soulear-xxxx », le WIFI est connecté, revenez à nouveau à l'application et cliquez sur « Équipement connecté » pour accéder à l'appareil.




FR-5

Après vous être connecté à la connexion WIFI du produit, quelques questions vous seront posées :

IOS :
"Soulear" souhaite rechercher et se connecter aux appareils de votre réseau local. Suggestion : cliquez sur "OK"






Autoriser « Soulear » à utiliser les données sans fil ?
Suggestion:
Cliquez sur « WLAN et cellulaire/WLAN uniquement »

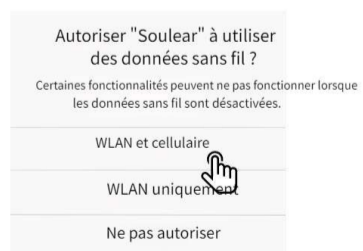

FR-6

Android:
Si votre téléphone mobile affiche le suivant les invites, le WiFi n'a pas de données connexion, s'il faut continuer à essayer d'utiliser le WiFi ?
Suggestion:
Cliquez sur l'option "Conserver"/"CONNECT"/"Refuser".

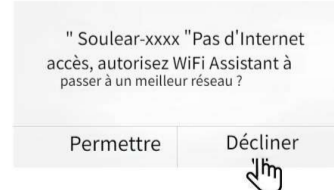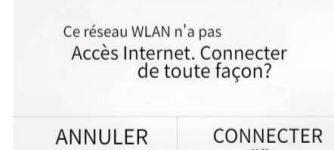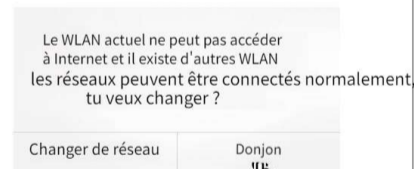

FR-7

Dépannage

Problèmes	Suggestions
Impossible de stocker des photos ou des vidéos sur votre téléphone	Que Soulear permette autorité des photos, médias et fichiers sur votre appareil
La caméra ne répond pas, la caméra ne s'allume pas	Veillez charger l'appareil
L'application est tombée en panne	Veillez désinstaller l'application et scannez le code QR pour l'installer
L'image en direct ne s'affiche après le lancement l'application	1. Assurez-vous de connecter le bon identifiant WIFI « Soulear-xxxx ». 2. La question : ce WLAN Le réseau n'a pas d'accès à Internet. Se connecter quand même ? Assurez-vous de choisir « Connecter ». Si vous choisissez « ANNULER » au premier temps, vous devez oublier le réseau WIFI "Soulear-xxxx" sur votre téléphone, puis connectez-vous avec ce WIFI à nouveau. Continuez à ouvrir l'application et choisissez "CONNECT" de cette question, afin qu'elle puisse fonctionner correctement. 3. Entrez votre appareil mobile et autorisez l'application « Soulear » à accéder à « WLAN » ou « WLAN et données cellulaires ». 4. Fermez l'application et rouvrez-la. 5. Activez les données du téléphone mobile, puis désactivez-les à nouveau.

FR-8

L'endoscope auriculaire est rouge lumière allumée	Veillez charger le produit
couverture de connexion WIFI	Veillez redémarrer l'endoscope auriculaire, ouvrez l'application, connectez-vous au WIFI
Lorsque l'iPhone vous invite "Impossible de rejoindre ce WiFi, le réseau est temporairement indisponible, veuillez réessayer plus tard"	Lorsque la situation ci-dessus se produit, veuillez essayer d'éteindre le produit, de le rallumer après 30 secondes et de vous reconnecter au WIFI pour vous connecter et l'utiliser.
Quand le téléphone Android se connecte au WIFI, il invite "Réseau l'accès est complet"	Lorsque la situation ci-dessus se produit, veuillez essayer d'éteindre le produit, de le rallumer après 30 secondes et de vous reconnecter au WIFI pour vous connecter et l'utiliser.
L'indicateur d'alimentation de la cure-oreille est rouge	Veillez utiliser la correspondance câble de charge pour charger
Si les instructions d'utilisation ci-dessus ne parviennent pas à résoudre le problème	Si les instructions d'utilisation ci-dessus ne parviennent pas à résoudre le problème, s'il vous plaît - contactez le service client du vendeur par e-mail, et nous vous fournirons d'autres solutions

FR-9

Paramètre de produit

Nom du produit Nettoyant pour oreilles avec caméra	Fréquence de travail 2,4 GHz
Norme de réseau IEEE 802.11b/g/n	Capteur d'image CMOS
Taux de transmission d'images 30 images par seconde	détecteur de gravité 6 axes
Température de l'environnement 10-50°C	Temps de charge 1h30
Vie de la batterie Environ 70 minutes	Tension de travail 3,7 V-4,2 V
Paramètre d'entrée 5V=,0,4A	Diamètre de la lentille 3.5mm
Puissance nominale 0,75 W	Résolution 1080P
Meilleure distance focale 1.5-2cm	Port de chargement USB2.0

FR-10

Pulitore per le orecchie Con La Macchina Fotografica

Manuale d'uso
IT

Precauzioni

- Non utilizzare questo strumento in caso di infezione attiva dell'orecchio, timpano rotto o arrossamento. Interrompere immediatamente l'uso e rivolgersi a un medico ogni volta che si avverte dolore o disagio durante l'uso.
- Si prega di leggere attentamente le istruzioni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati dai nostri prodotti. Se hai il drenaggio dell'orecchio, secrezione, dolore all'orecchio, perforazione dell'orecchio o lesioni, consultare il medico prima dell'uso.
- L'app scaricata ti aiuta a visualizzare e rimuovere il cerume dal condotto uditivo. Si prega di tenere il cucchiaino auricolare a distanza di sicurezza dal timpano.
- Si prega di fare attenzione quando lo si utilizza per evitare di entrare troppo in profondità nel condotto uditivo e causare lesioni al condotto uditivo.
- Se il cerume è duro e ostinato da rimuovere, utilizzare alcune gocce per le orecchie giorni per ammorbidirlo prima di rimuoverlo. Non premere troppo forte sul condotto uditivo durante la rimozione della cera per evitare graffi.
- Se al primo utilizzo del dispositivo è presente un accumulo significativo di cerume, è meglio rimuovere il cerume in più fasi per evitare irritazioni.
- Dopo la pulizia iniziale della cera, utilizzare l'apparecchio secondo necessità per evitare ulteriori accumuli di cera.

IT-2

- Disinfettare sempre gli accessori e il dispositivo con alcool dopo l'uso. Quando pulire l'obiettivo, pulire accuratamente con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool professionale. È vietato immergersi in acqua o lavare tutto il corpo.
- È vietato utilizzare questo dispositivo durante la ricarica.
- È vietato ai bambini utilizzare questo prodotto da soli per evitare danni incuranti.

Passaggi per l'utilizzo al telefono

Passo 1

Scarica l'applicazione "Soulear".
Per IOS:
Scarica e installa l'app "Soulear" dall'App Store.
Per Android:
Scarica e installa l'app "Soulear" da Google Play Store. Opzionale:
Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'app.



IT-3

Dispositivo compatibile:
Android 4.4, IOS 9.0 e versione successiva.
Telefono con sistema Android
come Samsung S7, Galaxy S6 edge, Note 8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel, XL, Pixel 3, Nexus 6p, Huawei Mate9, Mate 10, Mate 20 Pro, OnePlus ecc.

Telefono di sistema IOS come iPhone 6, 6s, 7, 7+, 8, 8+, X, XR, ecc.

Avviso:
Questo modello non può funzionare per i sistemi informatici!

Passo 2

Premere a lungo il tasto interruttore per aprire dispositivo, dopo 5 secondi, quindi passare all'operazione successiva.



Passaggio 3

Apri l'app "Soulear", fai clic su "Connetti dispositivo" segue il pop-up prompt e fare clic su Connetti ora per passare all'interfaccia di impostazione Wi-Fi mobile.

IT-4



Passaggio 4

Trova "Soulear-xxxx" sull'interfaccia di impostazione WIFI e fai clic per connetterti.



Passaggio 5


Dopo che il telefono cellulare visualizza "Soulear-xxxx" il Wi-Fi è connesso, tornare nuovamente all'app e fare clic su "Apparecchiatura connessa" per accedere al dispositivo.



IT-5

Dopo aver effettuato la connessione Wi-Fi del prodotto, ti verranno poste alcune domande:

IOS:
"Soulear" vorrebbe trovare e connettersi ai dispositivi sulla rete locale.
Suggerimento: fare clic su "OK"


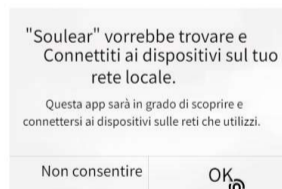


Consentire a "Soulear" di utilizzare i dati wireless?
Suggerimento:
Fai clic su "WLAN e cellulare/Solo WLAN"



IT-6

androide:
Se il tuo cellulare visualizza il file seguendo le istruzioni, il WiFi non ha dati connessione, se continuare a provare a utilizzare il WiFi? Se mantenere il connessione? Se cambiare WiFi?
Suggerimento:
Fare clic sull'opzione "Mantieni"/"CONNETTI"/"Rifiuta".

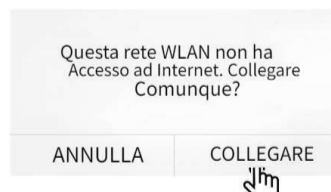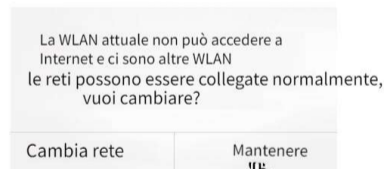

IT-7

Risoluzione dei problemi

I problemi	Suggerimenti
Impossibile memorizzare le foto o video sul tuo telefono	Lascia che Soulear lo permetta autorità di foto, contenuti multimediali e file nel dispositivo
La fotocamera non risponde, la fotocamera non si accende	Si prega di caricare il dispositivo
L'applicazione si è bloccata	Disinstallare l'app e scansionare il codice QR per installarla
L'immagine dal vivo non spettacolo dopo il lancio l'applicazione	1. Assicurati di connettere l'ID WIFI corretto "Soulear-xxxx". 2. La domanda: questa WLAN la rete non ha accesso a Internet. Connettersi comunque? Assicurati di scegliere "Connetti". Se scegli "ANNULLA" all'inizio volta, è necessario dimenticare la rete Wi-Fi "Soulear-xxxx". Il tuo telefono, quindi connettiti di nuovo questo WIFI. Continua ad aprire l'app e scegli "CONNETTI" di questa domanda, in modo che possa funzionare correttamente. 3. Inserisci il tuo dispositivo mobile impostazione e consentire all'app "Soulear" di accedere a "WLAN" o "WLAN e dati cellulare". 4. Chiudi l'App e riaprila. 5. Attivare e disattivare nuovamente i dati del telefono cellulare.

IT-8

L'endoscopio auricolare è rosso	Si prega di caricare il prodotto
Accendi	
Interruzione della connessione Wi-Fi	Riavviare l'endoscopio auricolare, apri l'app, connettiti al Wi-Fi
Quando Iphone lo richiede "impossibile accedere a questo Wi-Fi, la rete è temporaneamente non disponibile, riprova più tardi"	Quando la situazione di cui sopra si verifica, provare a spegnere il prodotto, riaccenderlo dopo 30 secondi e riconnettersi al Wi-Fi per connettersi e utilizzarlo.
Quando il telefono Android si collega al Wi-Fi, esso richiede "Rete l'accesso è completo"	Quando la situazione di cui sopra si verifica, provare a spegnere il prodotto, riaccenderlo dopo 30 secondi e riconnettersi al Wi-Fi per connettersi e utilizzarlo.
L'indicatore di alimentazione di lo stuzzicadenti è rosso	Si prega di utilizzare la corrispondenza cavo di ricarica per caricare

Se le istruzioni operative di cui sopra non riescono a risolvere il problema, per favore: contatta il servizio clienti del venditore tramite e-mail e ti forniremo ulteriori soluzioni

IT-9

Parametro del prodotto

nome del prodotto Pulitore per orecchie con fotocamera	Frequenza di lavoro 2,4 Ghz
Norma di rete IEEE802.11b/g/n	Sensore d'immagine CMOS
Velocità di trasmissione delle immagini 30 fps	Sensore di gravità 6 assi
Temperatura ambientale 10-50 C	Tempo di carica 1,5 ore
Durata della batteria Circa 70 minuti	Tensione di lavoro 3,7 V-4,2 V
Parametro di input 5 V=0,4 A	Diametro della lente 3.5mm
Valuta la potenza 0,75 W	Risoluzione 1080p
Migliore lunghezza focale 1.5-2 cm	Porta di ricarica USB2.0

IT-10

منظف للأذن مع الكاميرا

دليل الاستخدام
EN

احتياطات

- لا تستخدم هذه الأداة إذا كنت تعاني من التهابات تشبث في الأذن أو تعرق في طبلة الأذن أو احمرار. توقف عن الاستخدام على الفور واطلب الرعاية الطبية كلما شعرت بالألم أو الانزعاج أثناء الاستخدام.
- يرجى قراءة التعليمات بعناية. نحن لا نتحمل المسؤولية عن أي إصابات قد تحدث بسبب منتجاتنا. إذا كان لديك تصريف الأذن إفرازات، أو ألم في الأذن، أو تعب في الأذن، أو الإصابة، يرجى استشارة الأطباء قبل الاستخدام.
- يساعدك التطبيق الذي تم تنزيله على تصور وإزالة شمع الأذن من قناة الأذن. يرجى إبقاء ملعقة الأذن على مسافة آمنة من طبلة الأذن.
- يرجى توخي الحذر عند استخدامه لتجنب التعرض في قناة الأذن والتسبب في إصابة قناة الأذن.
- إذا كان شمع الأذن صعباً وصعب الإزالة، فيرجى استخدام قطرات الأذن لبضع مرات أيام لتليينه قبل إزالته. لا تضغط بقوة على قناة أذنيك عند إزالة الشمع لتجنب أي خدش.
- إذا كان هناك تراكم كبير لشمع الأذن عند استخدام الجهاز لأول مرة، فمن الأفضل إزالة الشمع على مراحل لتجنب التهيج.
- بعد التنظيف الأولي للشمع، استخدم الجهاز حسب الحاجة لتجنب أي تراكم إضافي للشمع.

إن-2

قم دائما بتطهير الملحقات والجهاز بالكحول بعد الاستخدام. مني تنظيف العدسات، يرجى مسحها بعناية باستخدام قطعة فلين احترازية لمسح الكحول. ويحرم نغعه في الماء أو غسل الجسم كله.

يحظر استخدام هذا الجهاز أثناء الشحن.

يحظر على الأطفال استخدام هذا المنتج بمفرده لتجنب الأذى الناتج عن الإهمال.

خطوات الاستخدام على الهاتف

الخطوة 1

"تحميل تطبيق "سولير" iOS: لنظام التشغيل
قم بتحميل وتثبيت تطبيق من متجر التطبيقات "Soulear".
لأجهزة الأندرويد: قم بتحميل وتثبيت تطبيق "Soulear" من متجر Google Play.
امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لينتقل إلى التطبيق.



إن-3

جهاز متوافق:
والإصدارات الأحدث iOS 9.0، أندرويد 4.4.
Android هاتف يعمل بنظام Samsung S7 وGalaxy S6 edge, Note 8, S8, S8+, S9+, S10, Google Pixel, XL, Pixel 3, Nexus 6p, Huawei Mate9, Mate 10, Mate 20 Pro, OnePlus الخ.

مثل iOS هاتف يعمل بنظام iPhone 6, 6s, 7, 7+, 8, 8+, X, XR, الخ.

بلاخط:

هذا النموذج لا يمكن أن يعمل مع أنظمة الكمبيوتر.

الخطوة 2

اضغط لفترة طويلة على مفتاح التبديل لفتح الجهاز، بعد 5 ثوان، ثم انتقل إلى العملية التالية.



الخطوة 3

وانقر على "Soulear" افتح تطبيق اتبع "توصيل الجهاز" في النافذة المنبثقة اطلب وانقر للاتصال الآن للانتقال المحمول WiFi إلى واجهة إعداد

إن-4



الخطوة 4

على واجهة "Soulear-xxxx" ابحث عن وانقر للاتصال WiFi إعداد



الخطوة 5

بعد أن يعرض الهاتف المحمول ارجع إلى "Soulear-xxxx" WiFi اتصال التطبيق مرة أخرى وانقر على الجهاز المتصل" للدخول إلى الجهاز"



إن-5

WiFi بعد الاتصال باتصال الخاص بالمنتج، سيتم طرح بعض الأسئلة عليك:

دائرة الرقابة الداخلية: يرجى في العنور على الأجهزة "Soulear" الموجودة على شبكتك المحلية والاتصال "بها". اقتراح: اضغط على "موافق"

يود العنور على و "Soulear" الاتصال بالأجهزة الموجودة على جهازك شبكتك محلية. يمكنك هذا التطبيق فإدرا على اكتشاف و الاتصال بالأجهزة الموجودة على الشبكات التي تستخدمها.

لا تسمح نعم

باستخدام البيانات اللاسلكية؟ "Soulear" هل تسمح لـ اقتراح: "فقط WLAN&Cellular/WLAN" انقر فوق

بالاستخدام "Soulear" اسمح لـ البيانات اللاسلكية؟ قد لا تعمل بعض الوظائف عندما يتم إيقاف تشغيل البيانات اللاسلكية.

الشبكتك المحلية اللاسلكية والخلفية الشبكتك اللاسلكية فقط لا تسمح

إن-6

مظهر: إذا كان هاتفك المحمول يعرض على بيانات WiFi بانواع المطالبات، لا تحتوي شبكة الاتصال، سواء كنت تريد الاستمرار في محاولة؟ سواء كنت تريد الاحتفاظ بالشبكة WiFi استخدام اتصال؟ سواء للتبديل واي فاي؟ اقتراح: "انقر على خيار "الاحتفاظ"/"الاتصال"/"الرفض".

الحالية الوصول WLAN لا يمكن لشبكتك أخرى WLAN إلى الإنترنت وهناك شبكات يمكن توصيل الشبكات بشكل طبيعي هل تريد التبديل؟

تبدل الشبكة يحفظ

هذه WLAN لا يوجد لدى شبكة خدمة الإنترنت. يتصل على أي حال؟

يتصل بلقي

لا يوجد إنترنت "Soulear-xxxx" الوصول، والسماح لمساعد واي فاي التبديل إلى شبكتك أفضل؟

انخفاض يسمح

إن-7

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشاكل	اقتراحات
لا يمكن تحريك الصور أو مقاطع الفيديو على هاتفك	دع سولير يسمح بسلطته الصور والوسائط والملفات الموجودة في جهازك
الكاميرا لا تستجيب	يرجى شحن الجهاز
تعتل التطبيق	يرجى إلغاء تثبيت التطبيق ومسح رمز الاستجابة السريعة مؤقتاً للتثبيت
الصورة الحية لا تظهر بعد الإطلاق التطبيق	1. تأكد من توصيل الصحن WiFi معرف Soulear-xxxx بالشبكة. السؤال: هذه الشبكة المحلية Soulear-xxxx؟ الشبكتك ليس لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت الاتصال على أي حال؟ يرجى التأكد من اختيار "الاتصال" إذا اخترت "إلغاء" في البداية الوقت عليك أن تسمى شبكة WiFi "Soulear-xxxx" هاتفيك، ثم اتصل به مرة أخرى WiFi هذا استمر في فتح التطبيق واختيار "اتصال" لهذا السؤال حتى يعمل بشكل صحيح 3. أدخل جهازك المحمول "Soulear" الإعداد والسماح لتطبيق أو "WLAN" بالوصول إلى "WLAN & Cellular Data". 4. أغلق التطبيق واقطعه. 5. مرة أخرى قم بتشغيل بيانات الهاتف المحمول. ثم قم بإيقاف تشغيلها مرة أخرى

إن-8

يرجى شحن المنتج	مطار الأذن باللون الأحمر الضوء يعمل
يرجى إعادة تشغيل مطار الأذن WiFi افح النطق، واتصل بشبكتك	WiFi انقطاع اتصال
عندما الوضع أعلاه في حالة حدوث ذلك، يرجى محاولة إيقاف تشغيل المنتج، وتشغيله مرة أخرى بعد 30 ثانية، وإعادة للاتصال WiFi الاتصال بشبكتك والاستخدام	عندما يتطالك ابغون لا يمكن الاتصال إلى هذه الشبكة WiFi شبكة غير متاحة مؤقتاً، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقاً
عندما الوضع أعلاه في حالة حدوث ذلك، يرجى محاولة إيقاف تشغيل المنتج، وتشغيله مرة أخرى بعد 30 ثانية، وإعادة للاتصال WiFi الاتصال بشبكتك والاستخدام	عندما يكون هاتف أندرويد عليه WiFi يصل بطالب "الشبكة" الوصول ممثلين
الرجاء استخدام المطابقة كابل شحن للشحن	مؤشر الطاقة يظهر اختيار الأذن باللون الأحمر
إذا فشلنا تعليمات التشغيل المذكورة أعلاه في حل المشكلة مشاكل، من فضلك - اتصل بخدمة عملاء المنتج عن طريق البريد الإلكتروني، وسوف نقدم لك المزيد من الحلول	

إن-9

معلمة المنتج

تردد العمل جيجتا هرتز 2.4	اسم المنتج منظف الأذن بالكاميرا
مستشعر الصورة CMOS	ممار الشبكة إبي 802.11 ب/ر/ن
حساس الحادية المحور 6	معدل نقل الصورة إطارا في الثانية 30
وقت الشحن ساعة 1.5	درجة حرارة البيئة ج 10-50
طاقة كهربائية شغالة فولت-4.2 فولت 3.7	عمر البطارية حوالي 70 دفعة
قطر العدسة مم 3.5	معلمة الإحجال فولت=0.4 أمبير 5
دقة بكسل 1080	معدل القوة واط 0.75
مينا الشحن USB2.0	أفضل البعد البؤري سم 2-1.5

إن-10